



Den rette vei til den endelige restaurering

TEMPSMART™ DC
fra GC

Dualherdende kompositt
til midlertidige kroner og broer

GC

TEMPSMART DC fra GC

Opplev den ultimative nyskapelse:
sterk, hurtig og...fantastisk!

Den midlertidige restaurering er viktig. Den beskytter ikke bare de preparerte tenner, den skal også være **plassholder, komfortabel, estetisk og brukbar** inntil den endelige restaurering settes på. GC introduserer den nye TEMPSMART DC som gjør det enklere og hurtigere å lage midlertidige restaureringer. TEMPSMART DC er det første midlertidige materiale som er fri for bløtningsmiddel og **som er dualherdende med formålet å gjøre arbeidet lettere for tannlegen.**


Ta den SMARTE veien

TEMPSMART DC kan **lysherdnes**, og det er en stor fordel: Du kan **kontrollere polymeriseringen**, og den endelige herdeprosess optimeres. Dermed oppnår du en **hurtigere og mere effektiv** prosedyre som **sparer deg for mye tid**. Lysherdningen styrker dessuten den midlertidige restaurering, spesielt bøyestykken.



Lysherdning extra-oralt

TEMPSMART DC prosedyre over tid sammenliknet med konkurrentene (minutter)

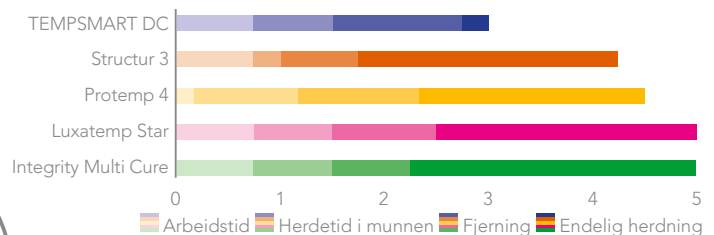


Kilde: GC R&D, Japan 2018, interne data.

Ta den SIKRE vei

De **lange polymerkjeder** er med på å **øke bøyestykken og bruddstyrken**, hvilket gjør TEMPSMART DC ideell til langtidsprovisorer. Det betyr at risikoen for **brudd er langt mindre** og dermed opplever du **færre omgjøringer**; Du sparer tid og penger.

Bruddstyrke sammenliknet med konkurrentene (MPa·m^{1/2})

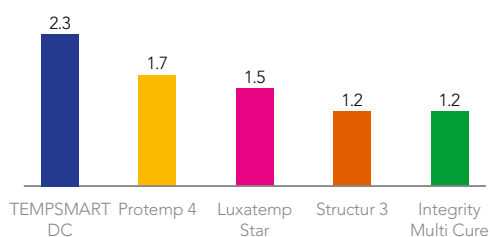

Kilde: GC R&D, Japan 2018, interne data.

Ta den ENKLE vei

TEMPSMART DC finnes i **1:1 systemer**, og inneholder ikke bløtningsmidler. Det sikrer en **optimal herdning, en glatt og ikke-klebrig overflate** med nesten fravær av oksygeninhibert lag. Dermed kan gingiva bedre tilhele og plakk fjernes enkelt.



Sammenlikning av tradisjonell 10:1 magasin med bløtningsmidler (venstre) versus resultat oppnådd med 1:1 magasin av TEMPSMART DC uten bløtningsmidler (høje).



Det sterke materialet gjør TEMPSMART DC ideell til posteriore midlertidige broer

1. Initial situasjon.
2. Applisering av TEMPSMART DC i avtrykket.
3. Fjerning av aftrykket 2'00"-2'30" etter start av blanding. Lysherdes i 5 sek per overflate, etter fjerning av overskudd.
4. Etter polering: Sementerering av broen med Freegenol eller Fuji TEMP LT.



Takk til Tnl. C. Lampson, Tyskland

Veien til den GLADE pasient!

Takket være den ikke-klebrige overflate og et par enkle pussetrinn oppnås hurtig et pent resultat

1. Initiale situasjon.
2. Etter applisering av TEMPSMART DC og plassering i munnen kan restaureringen fjernes etter 2'30" min og lysherdes.
3. Endelig polering med et par enkle trinn.
4. Endelig restaurering med høy glans.



Takk til Tnl. J. Tapia Guadix, Spania

Ta den VAKRE vei

TEMPSMART DC fås i **6 farver**, alle med naturlig fluorescence. GC smarte filler-teknologi gjør den lett å polere til høyglans.



Høyglans med manuell polering eller karakterisering med OPTIGLAZE color nano-filled coating (GC).



TEMPSMART DC fra GC

Den rette vei til den endelige restaurering

Ta den SMARTE vei

Kort arbeidsprosess
takket være lyshveringen



TEMPSMART DC, 48 ml magasin 16 blandespisser						
Ref.	12760	12761	12762	12763	12764	12765
farve	A1	A2	A3	A3,5	B1	BW

Ta den SIKRE vei

Holdbare restaureringer
med høy bruddstyrke

Ta den ENKLE vei

Oppnå hurtig høyglans
med enkle trinn



TEMPSMART DC, 10 ml sprøyte, 10 blandespisser				
Ref.	12766	12767	12768	12769
farve	A1	A2	A3	B1

Ta den VAKRE vei

Fluorescence og holdbar
glans til glede for dine
pasienter

Relaterte produkter



Rebasering

Unifast III



Reparasjon

G-aenial Universal
Injectable



Karakterisering

OPTIGLAZE color



Midlertidig sementering

FREEGENOL Fuji TEMP LT



Fjerning av kroner

PLIERS

Freegenol, G-aenial Universal Injectable, OPTIGLAZE color, FREEGENOL, Fuji TEMP LT, UNIFAST Trad og PLIERS er GC varemerker. Integrity Multi Cure, Luxatemp Star, Protemp 4 and Structur 3 er ikke varemerker hos GC.

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<http://www.gceurope.com>

GC Nordic AB

Strandvägen 54
S-193 30 Sigtuna, Sverige
Tel.: +46 768 544 350
info.nordic@gc.dental
<http://nordic.gceurope.com>